


10488

BIOPIEZO 2

ELECTROSTIMULATION
IONISATION

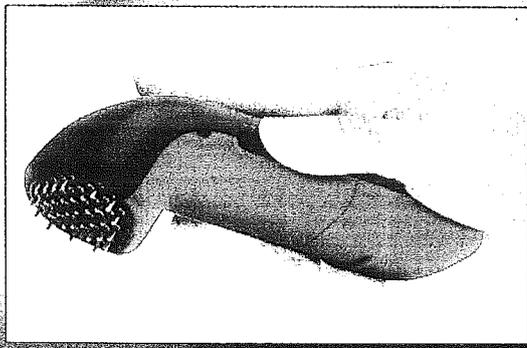

BIOPIEZO2

ELEKTROSTIMULATION
IONISATION

Die Wirkung des Biopiezo2 lindert:

Verspannungen
Muskelkater
Gelenkschmerzen
Sehnenschmerzen

Die Wirkung des Biopiezo2 steigert:

das Wohlbefinden
die Vitalität
die Beweglichkeit der Gelenke
und Muskeln
die Remineralisierung

Einführung

Das Gerät Biopiezo war eine große Erfindung für die Linderung von Gelenk-, Muskel- und Sehnen-schmerzen.

Heute wird **Biopiezo 2** zu einem Erlebnis, indem es die Elektrostimulation mit Negativ-Ionen verbindet.

Sehr leicht zu handhaben, wird **Biopiezo 2** mit nur einer Hand bedient, um Ihnen noch mehr Wohlbefinden an den Gelenken (Knien, Handgelenken, Ellenbogen,...), im unteren Rücken- und Lendenbereich sowie im Halsbereich zu verschaffen...

Sehr kompakt, begleitet Sie **Biopiezo 2** an allen Orten und zu jedem Zeitpunkt.

Es ist zu Hause, im Büro oder in den Ferien verwendbar.

• Wie wirkt Biopiezo 2 ?


Biopiezo 2 bietet Ihrem Organismus ZWEI exklusive Wirkungen:

1) Elektrostimulation der vom Schmerz betroffenen Körperzonen: ausgestattet mit 36 sogenannten "elektrostimulierenden" Zacken, schickt **Biopiezo 2** einen Elektronenfluss in die empfindliche Körperzone. Diese Elektronen sind dafür bekannt, eine beruhigende und besänftigende Wirkung zu haben.

2) Verteilung der Negativ-Ionen: Im Zentrum des Kopfes des **Biopiezo 2** befindet sich ein kleiner Spitzhammer bzw. Zacken aus Kohlenstoff, der ein Negativ-Ionen-Feld in die gesamte empfindliche Körperzone schickt. Das ist eine absolute Neuheit!

• Wie setzt man Biopiezo 2 ein ?

- 1) Sie müssen Ihr **Biopiezo 2** einfach nur einschalten und es auf der Körperzone anwenden, die Sie quält. Sie werden sofort ein leichtes Kribbeln verspüren. Die Impulse steigern sich langsam und sind angenehm.
- 2) Zwei unabhängige Regulier-Systeme helfen Ihnen, die Wirkung des **Biopiezo 2** zu optimieren:

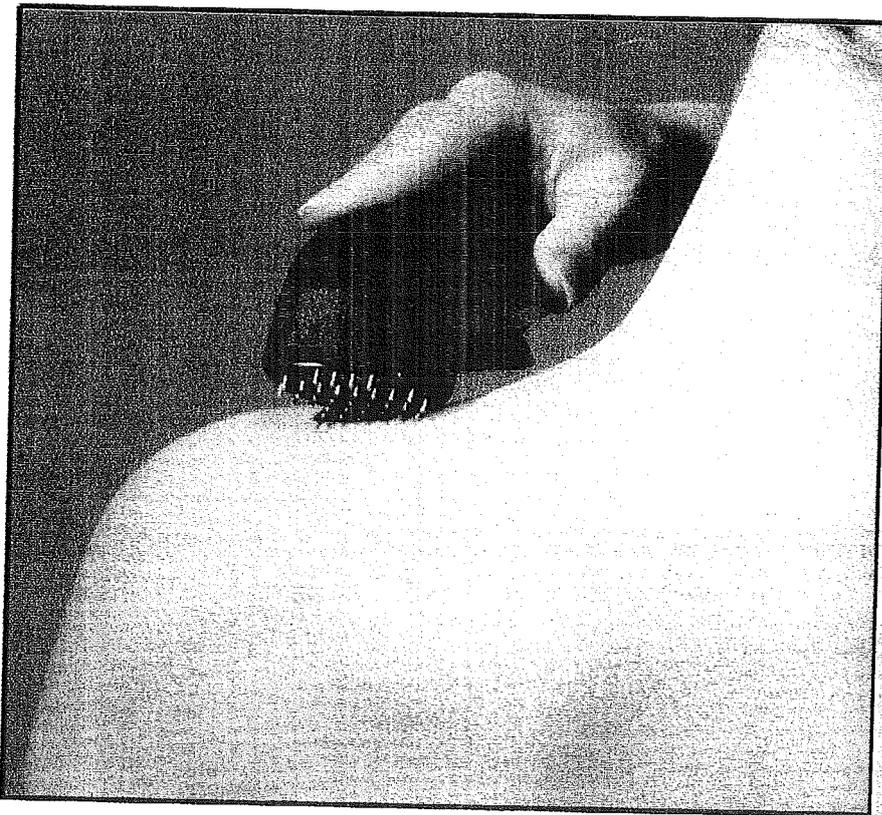

- a. Ua Ein Knopf zur Kontrolle der Frequenz der gleichzeitigen Verteilung der Elektronen- und der Negativionen-Flüsse (Ihres Empfindlichkeitsgrades entsprechend).
- b. Ein Spornrädchen zur Kontrolle der Intensität der Impulse (Ihrer individuellen Empfindlichkeit entsprechend).

Das Biopiezo 2 ist vollkommen sicher und natürlich.

Gebrauchshinweis

Wenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von bzw. direkt auf kleineren und größeren Verletzungen, Wunden oder Hautausschlägen an. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Herz- oder Herzkranz-Probleme haben, wenn Sie unter irgendeiner Thrombose leiden oder wenn Sie schwanger sind.

Konsultieren Sie im Zweifel Ihren Arzt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie spezielle detaillierte Empfehlungen für eine korrekte Anwendung des **Biopiezo 2**.

Bemerkung: Dieses Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.

Gebrauch des Biopiezo 2 :

Anwendung:

Um die Sitzung zu beginnen, halten Sie folgendes Verfahren ein:

- ↙ Schalten Sie das Gerät ein. Drehen Sie das an der Seite befindliche Spornrädchen und wählen Sie zunächst den gewünschten Intensitätsgrad (zu Beginn den schwächsten).
- ← Setzen Sie das Gerät **Biopiezo 2** auf der empfindlichen Körperzone an (wobei Sie die oben genannten Zonen und Bereich aussparen) und führen Sie kleine kreisende Bewegungen aus.
- ↑ Wählen Sie dann den gewünschten Intensitätsgrad, indem Sie das Einstellrädchen des Gerätes drehen, bis dass Sie ein leichtes Kribbeln verspüren.



- ➔ Diese Empfindung muss angenehm sein. Sie zeigt Ihnen an, dass sie den richtigen Intensitätsgrad erreicht haben.
- ↓ Sie können die Intensität während der Sitzung ändern, sie muss jedoch im angenehmen Bereich bleiben.
- ↶ Ein zweiter Knopf ermöglicht es Ihnen, die Frequenz der Elektro-Stimulationsflüsse und der Verteilung von Negativionen Ihrem Empfindlichkeitsgrad entsprechend zu regulieren.

EMPFEHLUNG:

Als weitere Vorsichtsmaßnahmen wählen Sie zu Beginn die niedrigsten Intensitäts- und Frequenzstufen aus.

Wenn Sie die höchsten Intensitäts- und Frequenzstufen verwenden, NIEMALS den Kopf des Gerätes stationär auf einem einzigen und gleichen Punkt halten.

Immer die gewählte Körperregion stimulieren, indem Sie leichte kreisende Bewegungen auf der Haut ausführen.

Die Sitzungen dauern 2 bis 7 Minuten (den jeweiligen Einstellungen und Ihrer individuellen Empfindlichkeit entsprechend). Niemals mit dem Biopiezo 2 zu kräftig auf die Haut drücken, um jegliche Hautirritation zu vermeiden.

BEMERKUNG: Während oder nach der Sitzung kann eine leichte Rötung entstehen, die sich jedoch schnell wieder verflüchtigen wird.

Rückenschmerzen

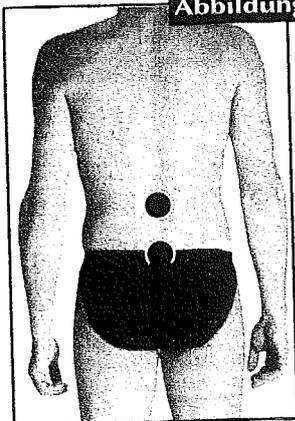


Abbildung 1

Das häufigste Leiden sind Schmerzen im unteren Rückenbereich. Dies kann durch eine abrupte Bewegung, eine schlechte Körperhaltung, einen verspannten Muskel,... hervorgerufen werden.

Behandeln Sie die auf nebenstehender Abbildung dargestellten Körperzonen mit Ihrem **Biopiezo 2**.

Schulerschmerzen

Ursache: ein verspannter Muskel, eine intensive Sportübung, Stress...

Führen Sie kreisende Bewegungen aus, um die in untenstehenden Abbildungen dargestellten Punkte mit Ihrem **Biopiezo2** zu stimulieren, wobei Sie die im Abschnitt „Gebrauchshinweise“ genannten Bedingungen berücksichtigen.

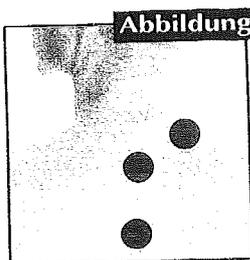


Abbildung 1

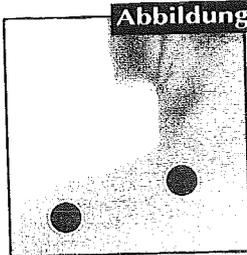


Abbildung 2


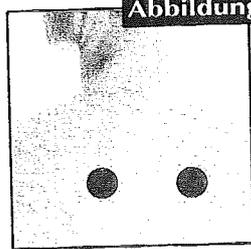


Abbildung 3

Schmerzen an den Ellenbogen

Abbildung 1

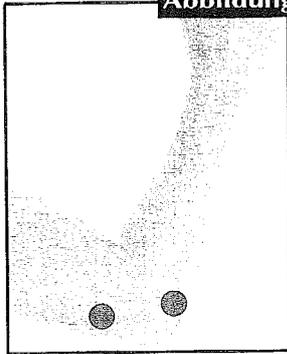

Ursache: ein verspannter Muskel, eine intensive Sportübung, Stress...

Führen Sie mit ihrem **Biopiezo 2** auf den nachfolgend dargestellten Körperregionen kleine Bewegungen aus.

Abbildung 2


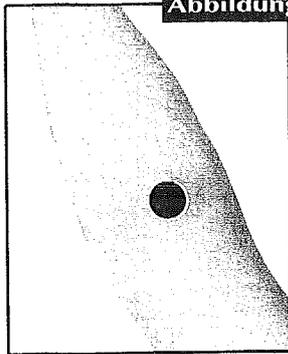


Abb. 1, 2, 3 - Stimulation der Ellenbogenzone.

Abbildung 3

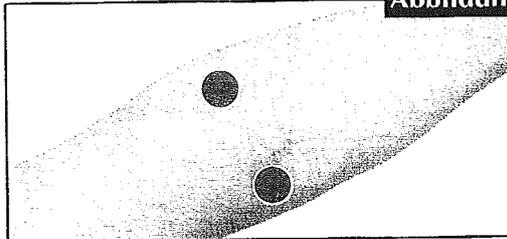

Knieschmerzen

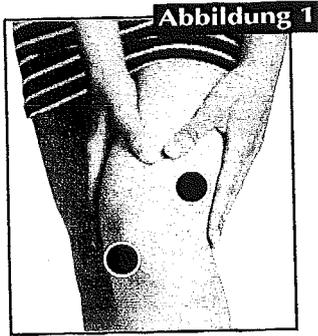


Abbildung 1

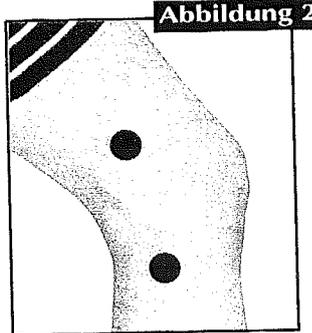


Abbildung 2


Ursache: ein verspannter Muskel, eine intensive Sportübung, Stress...

Führen Sie kleine kreisende Bewegungen aus, um die nachfolgend dargestellten Punkte mit Ihrem **Biopiezo 2** zu stimulieren, wobei Sie die im Abschnitt „Gebrauchshinweise“ aufgeführten Bedingungen einhalten.

Abb. 1, 2 - Stimulation der Knie-Zone.

Aus obenstehender schematischer Abbildung ersehen Sie die klassischen Akupunktur-Punkte, die Ihnen helfen können, zu einem besseren Wohlbefinden zu gelangen.

DAS BIOPIEZO2 HILFT, AUF DIE KLASSISCHEN AKUPUNKTUR-PUNKTE EINZUWIRKEN

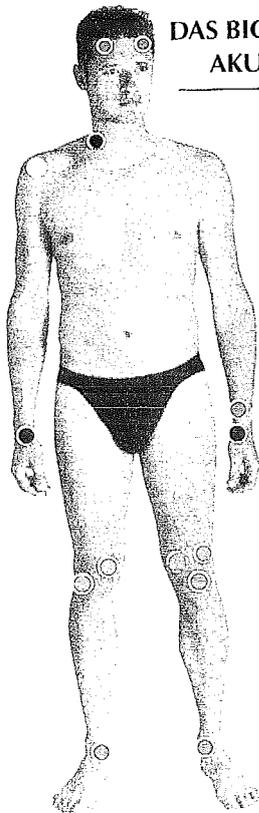

- **Revitalisierung**
2 mn an jedem Punkt
Intensität: minimal
- **Rückenschmerzen**
3 mn an jedem Punkt
Intensität: mittel
- **Schulterschmerzen**
2 mn an jedem Punkt
Intensität: mittel
- **Knieschmerzen**
2 mn an jedem Punkt
Intensität: mittel
- **Schmerzen an den Ellenbogen**
2 mn an jedem Punkt
Intensität: mittel

